



WatchBP[®] home ^A

Medición exacta de la
presión arterial en casa
con WatchBP home A.

Manual de Instrucciones



ES → 1

microlife[®]

Microlife WatchBP Home A es el primer tensiómetro digital del mundo que sigue estrictamente las recomendaciones de la Sociedad Europea de Hipertensión (SEH)^{1,2} y de la Asociación Americana del Corazón (AHA). El dispositivo WatchBP Home A le permite tomar en casa lecturas exactas de la presión arterial de las que puede fiarse su médico. El dispositivo WatchBP Home A ha sido validado clínicamente de acuerdo con el protocolo de la SEH³.

¹ O'Brien E, Asmar R, Beilin L, Imai Y, et al. European Society of Hypertension recommendations for conventional, ambulatory and home blood pressure measurement. European Society of Hypertension Working Group on Blood Pressure Monitoring. *J Hypertens* 2003;21:821-848.

² Stergiou GS, et al. A tool for reliable self-home blood pressure monitoring designed according to the European Society of Hypertension recommendations: The Microlife WatchBP Home monitor. *Blood press Monit.* 2007;12:127-131.

³ Stergiou GS, Givas PP, Gkinos CP, Patouras JD. Validation of the Microlife WatchBP Home device for self home blood pressure measurement according to The International Protocol. *Blood Press Monit.* 2007;12(3):185-188.

Índice

Antes de usar WatchBP Home A por primera vez

| | |
|---|-----|
| Descripción del producto | 3-4 |
| Activar el dispositivo | 5 |
| Seleccionar el brazalete correcto | 6 |

Tomar mediciones usando WatchBP Home A

| | |
|--------------------|-----|
| Modo «DIAG.» | 7-9 |
| Modo «USUAL» | 10 |

Ocho pasos para la toma correcta de mediciones de la presión arterial

| | |
|---|-------|
| Procedimientos de medición de la presión arterial | 11-14 |
|---|-------|


Ver, borrar y transferir lecturas


| | |
|--|-------|
| Detección de fibrilación auricular | 15 |
| Ver lecturas | 17-18 |
| Borrar lecturas..... | 19-20 |
| Transferir lecturas..... | 21-22 |

Apéndice

| | |
|--|-------|
| Pilas y adaptador de corriente | 23-24 |
| Seguridad, cuidado, prueba de precisión y eliminación | 25-26 |
| Mensajes de error | 27-28 |
| Datos importantes | 29-30 |
| Especificaciones técnicas | 31 |

WatchBP[®] home ^A

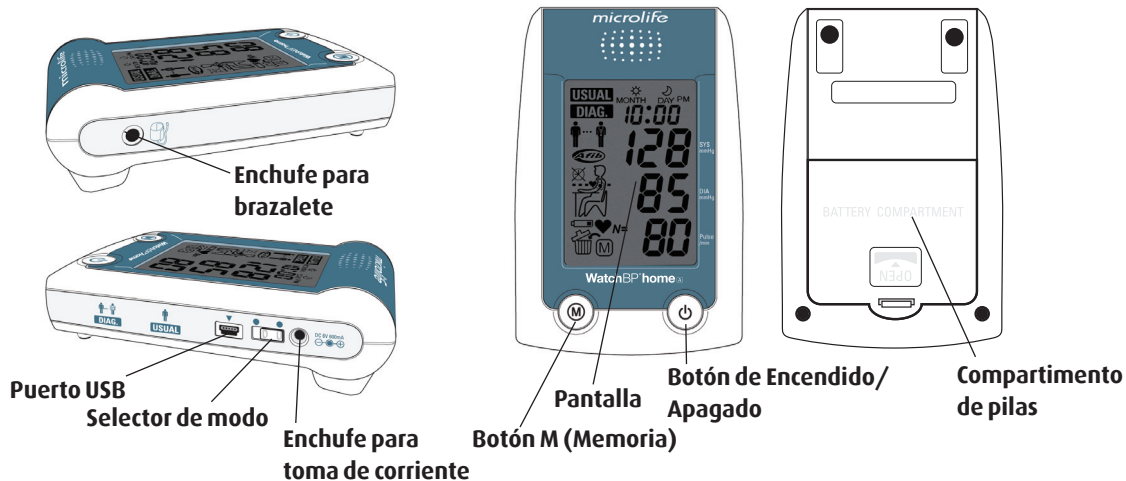


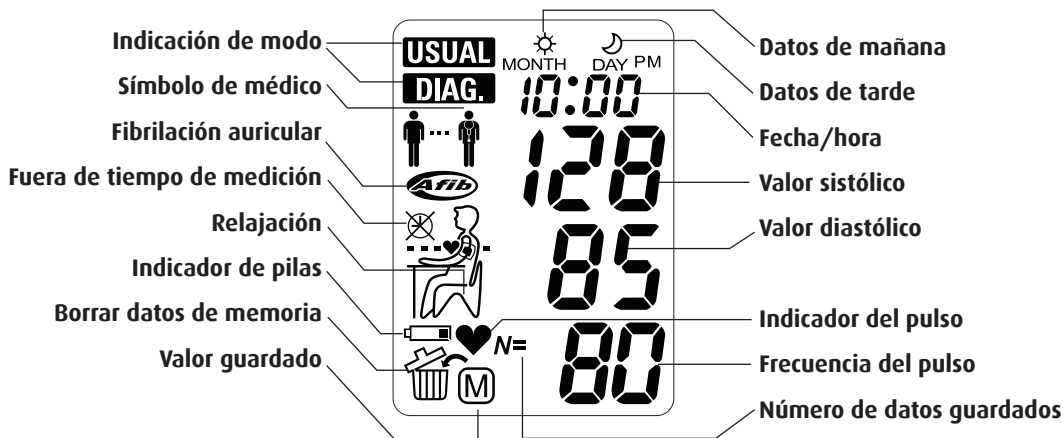

Antes de usar WatchBP Home A por primera vez


Activar el dispositivo

Retire la tira protectora del compartimento de pilas.

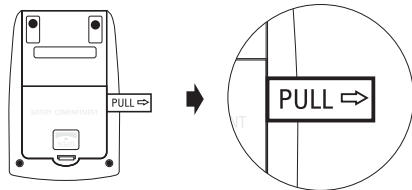

1) **Ajustar el año** – Después de retirar la tira protectora o de instalar pilas nuevas, el número del año parpadea en la pantalla. Use el botón M para seleccionar el año. Pulse el botón de Encendido/Apagado para confirmar su selección.

*Pulse el botón M para seleccionar
Pulse el botón de Encendido/
Apagado para confirmar.*

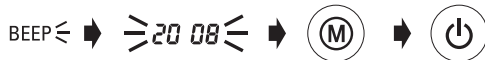


2) **Ajustar el mes** – Pulse el botón M para ajustar el mes. Pulse el botón de Encendido/Apagado para confirmar.



3) **Ajustar el día** – Pulse el botón M para ajustar el día. Pulse el botón de Encendido/Apagado para confirmar.



- 4) **Ajustar la hora** – Una vez que haya ajustado la hora y los minutos y pulsado el botón de Encendido/ Apagado, la fecha y la hora están puestas y se visualiza la hora actual.

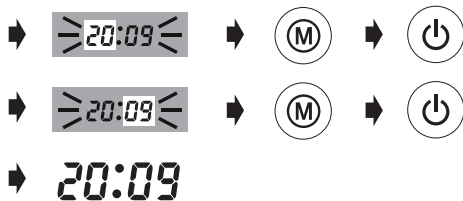


- 5) Si desea cambiar la fecha y la hora, extraiga brevemente una pila del compartimento de pilas y vuelva a colocarla. Parpadeará el número del año. Finalice el procedimiento tal como se ha descrito anteriormente.

Seleccionar el brazalete correcto

Para el dispositivo WatchBP Home A están disponibles brazaletes de distintos tamaños. Si el brazalete suministrado con el dispositivo no es el adecuado para usted, consulte con su médico, por favor.

❖ ¡por favor, use únicamente brazaletes Microlife!

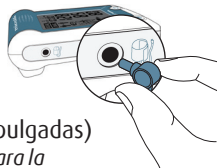

M (tamaño mediano)

22 - 32 cm (8.75 - 12.5 pulgadas)

M es el tamaño correcto para la mayoría de la gente.




L (tamaño grande)

32 - 42 cm (12.5 - 16.5 pulgadas)


Tomar mediciones usando WatchBP Home A

Antes de cada medición, use el Selector de Modo situado en el lateral derecho del dispositivo para seleccionar el modo de medición apropiado. Las dos opciones son:
Los modos «**DIAG.**» (Diagnóstico) o «**USUAL**» (Usual).

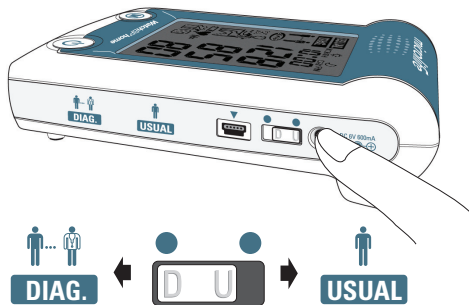

Modo «**DIAG.**»

El modo «**DIAG.**» debe seleccionarse por indicación de su médico cuando la presión arterial se mide de acuerdo con las directrices de medición de la Sociedad Europea de Hipertensión (SEH).

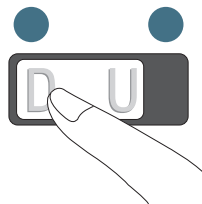

No tomar mediciones en días no laborables

En el modo «**DIAG.**» las mediciones de la presión arterial se toman **en 7 días laborables consecutivos** (o días normales de la semana). **¡En este modo no deben tomarse lecturas en días «no laborables»** (o días especiales de descanso)!



7 días laborables

Dos series de medición por día

Las directrices de la SEH recomiendan la toma de una doble medición por la mañana entre las 06:00 y las 09:00 h de la mañana y otra por la tarde entre las 18:00 y las 21:00 h. **Realice las mediciones siempre antes de tomar su medicación, a no ser que su médico le indique lo contrario.**



Directrices de la SEH



Horario extendido

Tomar mediciones usando WatchBP Home A (cont.)

Período de medición extendido

El dispositivo WatchBP Home A incluye un período de medición extendido permitiendo mediciones entre las 04:00 - 12:00 de la mañana y las 18:00 - 24:00 de la noche.



Fuera de estos períodos de tiempo no es posible tomar mediciones y en la pantalla se visualizará el símbolo que figura a la izquierda.

Evaluación


Una vez que se hayan llevado a cabo mediciones durante un total de 7 días laborables, lleve el dispositivo a su médico para que evalúe las lecturas de su presión arterial tomadas en casa.



Tras llevar a cabo mediciones durante 7 días, parpadeará en la pantalla el símbolo de Médico.

Modo «USUAL»

El modo «**USUAL**» debe seleccionarse cuando la presión arterial ha de medirse independientemente de las directrices recomendadas. En el modo «**USUAL**» es posible tomar mediciones individuales en cualquier momento, y los resultados son almacenados automáticamente para la evaluación posterior por su médico.

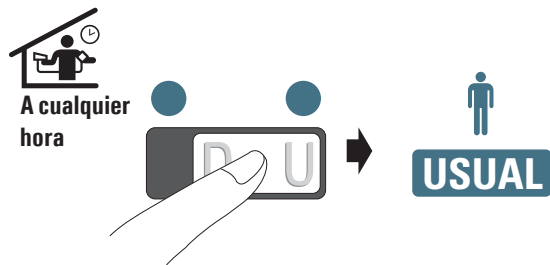

250 lecturas almacenadas de un modo seguro

El dispositivo WatchBP Home A es capaz de almacenar hasta 250 lecturas individuales en el modo «**USUAL**».

❖ *Cuando esté llena la memoria, cada nueva lectura sobrescribirá automáticamente la lectura más antigua.*



Ocho pasos para la toma correcta de la presión arterial

Paso 1

No tome mediciones inmediatamente después de comer, beber o fumar. Deje pasar al menos una hora entre estas actividades y la toma de su presión arterial.




1 hora antes




Paso 2

Prepare una silla y una mesa para la medición. La silla debe tener un respaldo vertical y la mesa debe permitirle colocar el brazo a la altura del corazón.

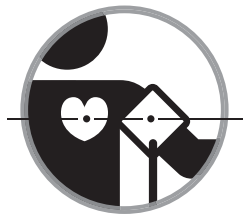

Paso 3

Quite cualquier prenda que cubra o apriete el brazo en el que tome la medición. Póngase el brazalete. Asegúrese que el borde inferior del brazalete se encuentre exactamente a 2-3cm del pliegue del codo. El tubo que conecta el brazalete al dispositivo debe situarse en el lado interior del brazo. *(Instrucciones visuales adicionales se encuentran en el brazalete)*

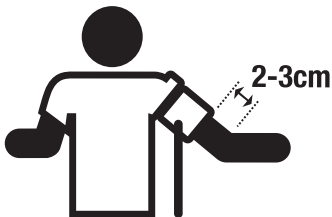

Paso 4

Siéntese y relájese durante al menos cinco minutos antes de la medición.



Ocho pasos para la toma correcta de la presión arterial (cont.)

Paso 5

Estando sentado recto y reclinado cómodamente contra el respaldo de la silla, pulse el botón de Encendido/Apagado. El dispositivo iniciará una cuenta atrás de 60 segundos. No se mueva, no cruce las piernas, ni tense los músculos de su brazo durante la medición. Respire normalmente y no hable.



Paso 6

Un ciclo de medición comprende dos mediciones. Una vez finalizada la primera medición, siga relajado mientras espera la segunda medición. La segunda medición comenzará transcurridos 60 segundos. Durante este tiempo, evite cualquier movimiento.



Paso 7

Una vez finalizadas las dos lecturas, los datos de medición se almacenan automáticamente para poder ser consultados posteriormente por su médico. En caso de visualizarse un error después de las lecturas, vuelva a repetir los seis primeros pasos, por favor.



**Almacenado
automáticamente**

Paso 8

Una vez que se hayan tomado mediciones durante siete días, parpadeará en la pantalla el símbolo de Médico. No olvide llevar su dispositivo WatchBP Home A en su próxima visita al médico. (Nota: El símbolo de Médico se visualiza únicamente para mediciones en el modo «DIAG.».)



Función especial

Aparición del indicador de fibrilación auricular para la detección precoz

Este dispositivo está diseñado para detectar la fibrilación auricular asintomática durante la medición de la presión arterial tanto en el modo «**USUAL**» como en el modo «**DIAG.**» Cuando durante las mediciones se detecta fibrilación auricular, se visualiza el icono de la FA 'Afib'. Este dispositivo es capaz de detectar la fibrilación auricular con una alta sensibilidad del 97% y una especificidad elevada del 89% según ensayos clínicos*. En caso de visualizarse el icono de fibrilación auricular después de la medición, recomendamos al usuario acudir al especialista y someterse inmediatamente a un examen de electrocardiograma.

* Joseph Wiesel, Lorenzo Fitzig, Yehuda Herschman y Frank C. Messineo. Detection of Atrial Fibrillation Using a Modified Microlife Blood Pressure Monitor. American Journal of Hypertension 2009; 22, 8, 848-852. doi:10.1038/ajh.2009.98



- * Este dispositivo detecta la fibrilación auricular que es una causa frecuente de infarto. Puede que no todos los factores de riesgo de infarto, incluido el flúter auricular, sean detectados por este dispositivo.
- * Este dispositivo puede no detectar la fibrilación auricular en personas con marcapasos o desfibriladores. Las personas con marcapasos o desfibriladores no deberían usar este dispositivo para detectar la fibrilación auricular.

Acerca de la fibrilación auricular

La fibrilación auricular es un problema común de ritmo cardíaco. Afecta a más de 2 millones de personas en Norteamérica. Es más común en personas de mayor edad y se presenta en un 10% de las personas mayores de 80 años. Es una causa común de infarto. Alrededor del 15% de todos los infartos son causados por fibrilación auricular.

Las personas mayores o las personas que tengan la presión arterial alta, diabetes o alguna enfermedad cardíaca son más propensas a sufrir un infarto si tienen fibrilación auricular.

La fibrilación auricular es un problema de ritmo que puede durar desde pocos minutos hasta días, semanas o incluso años. La fibrilación auricular puede causar coágulos de sangre en las cámaras superiores del corazón (la aurícula). Estos coágulos pueden desprenderse y circular hasta el cerebro causando un infarto.

El uso de diluyentes de la sangre, como la warfarina, puede reducir el riesgo de infarto en pacientes con fibrilación auricular.


El médico puede confirmar la presencia de fibrilación auricular realizando un ECG (electrocardiograma). A veces, la fibrilación auricular puede ser intermitente, es decir que puede aparecer y desaparecer. En este caso, es posible que el médico no la detecte en las consultas rutinarias.

Un indicio de la fibrilación auricular son las palpitaciones. No obstante, muchas personas no sienten nada cuando tienen fibrilación auricular y podrían sufrir luego un infarto. Deberían someterse a chequeos periódicos de fibrilación auricular. Detectar la fibrilación auricular precozmente y tratarla puede reducir el riesgo de un infarto.


Ver, borrar y transferir lecturas

Ver lecturas

- 1) Use el Selector de Modo para seleccionar en primer lugar el tipo de lecturas que desee ver.

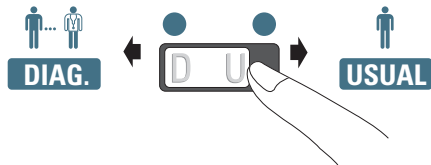

- 2) A continuación, pulse el botón M.

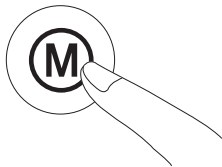

En el modo «DIAG.»

- 1) Al pulsar el botón M, se visualiza brevemente el número total de lecturas guardadas, por ejemplo, N=20.



* Se visualiza «A» si el número mostrado es el promedio de todos los datos.



* Se visualiza «- -» si el número de lecturas es inferior a 12.



- 2) Al pulsar de nuevo el botón M, se visualiza el promedio de todos los datos de mañana.




- 3) Al pulsar otra vez el botón M, se muestra el promedio de todos los datos de tarde.



* Se pueden ver todas las lecturas individuales pulsando repetidamente el botón M.

En el modo «USUAL»

- 1) Al pulsar el botón M, se visualiza brevemente el número total de lecturas guardadas, p.ej. N=63, inmediatamente seguido por el promedio de todas las lecturas guardadas en la memoria.

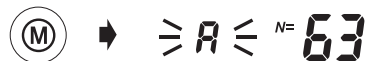

- 2) Se pueden ver todas las lecturas individuales pulsando repetidamente el botón M.



Ver, borrar y transferir lecturas (cont.)

Borrar lecturas


Los datos de «**DIAG.**» y «**USUAL**» pueden borrarse independientemente entre sí.



❖ *Antes de borrar datos, pregunte a su médico si los datos de medición se necesitan todavía. Borre las lecturas almacenadas únicamente si está seguro de que ya no necesita los datos.*



- 1) Use el Selector de Modo para seleccionar en primer lugar el modo de mediciones que desee borrar.

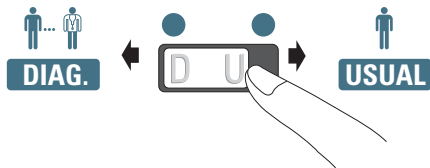

- 2) Pulse el botón M y manténgalo pulsado durante 7 segundos hasta que parpadee el símbolo de borrado.



➡ **Mantener presionado durante 7 segundos...**

- 3) Suelte el botón M y púlselo otra vez mientras parpadea el símbolo de borrado. El borrado se confirmará por una señal acústica.



- * *Se borrarán sólo las lecturas en el modo seleccionado. Los datos de medición en el otro modo han de borrarse independientemente.*
- * *Pulsando el botón M se borrarán todos los datos de medición en el modo seleccionado.*

Ver, borrar y transferir lecturas (cont.)

Transferir lecturas

Instalación del programa de software


- 1) Introduzca el CD en la unidad de CD-ROM de su ordenador. Alternativamente, haga clic en «**setup.exe**» en el directorio del CD.
- 2) Siga las instrucciones facilitadas en la ventana de instalación en la pantalla del ordenador.
- 3) Una vez finalizada la instalación, debe reiniciar el ordenador antes de trabajar con el programa.



❖ *Requisitos del sistema: CPU 550MHz. 256MB de memoria, resolución de 1024x768 píxeles, 256 colores, unidad CD-ROM, 1 puerto USB libre, 40MB de espacio libre en disco duro, Microsoft Windows 2000 / XP / Vista.*

Transferir datos al ordenador

- 1) Inicie el programa de software y conecte el dispositivo al ordenador usando el cable suministrado.
- 2) Si la conexión se ha realizado correctamente, se visualizará «**Connected**» (Conectado) en la pantalla del ordenador.
- 3) Introduzca el nombre, el número de identidad (si se requiere) y la fecha de nacimiento para crear un nuevo registro.

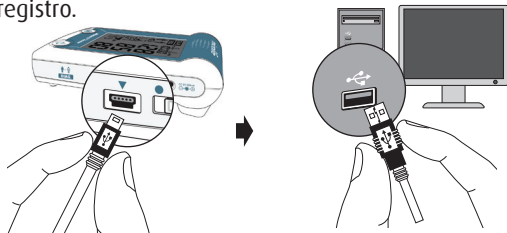

| Comandos de software | |
|---|--|
| Para más información e instrucciones, consulte el manual de usuario del software. | |
| Transferir datos del modo «DIAG.» | Haga clic en «Download» (Descargar) |
| Valor correspondiente | Podrá quitar la marca de verificación y el valor correspondiente no se usará para calcular el promedio. |
| Guardar datos | Haga clic en «Save» (Guardar), el nombre del archivo se genera automáticamente a partir del número de identidad del paciente y el sufijo «Dmode.xls». |
| Ver los datos | Haga clic en «Patient Files» (Archivos del paciente) |
| Guardar los datos del modo «USUAL» | Haga clic en «Download Usual Mode Data» (Descargar datos del modo Usual), el nombre del archivo se genera automáticamente a partir del número de identidad del paciente y el sufijo «Umode.xls». |
| Imprimir la hoja de datos | Haga clic en «Print» (Imprimir) |
| Borrar las memorias | Haga clic en «Clear Memory» (Borrar memoria) |
| Cerrar el programa | Haga clic en «Exit» (Finalizar) |

❖ *Por favor, guarde los datos antes de usar «Borrar memoria» o «Finalizar».*

Pilas y adaptador de corriente

Indicador de pilas

Cuando quede sólo una cuarta parte de la capacidad de las pilas, el símbolo de pilas parpadeará cada vez que se encienda el dispositivo.



Cambiar pilas bajas

Cuando tengan que sustituirse las pilas, el símbolo de pilas parpadeará cada vez que se encienda el dispositivo.


- 1) Abra el compartimento de pilas situado en la parte posterior del dispositivo.
 - 2) Reemplace las pilas – asegúrese de que la polaridad sea la correcta, tal como lo indican los signos en el compartimento.
- * Utilice 4 pilas de tamaño AA de 1.5V, de larga vida.
 - * No utilice pilas caducadas.
 - * Extraiga las pilas si no va a usar el dispositivo durante un período prolongado.

Uso de un adaptador de corriente

El dispositivo WatchBP Home A también se puede usar con un adaptador de corriente de Microlife (C.C. 6V, 600mA).

* *Utilice únicamente adaptadores de corriente de la marca Microlife.*

- 1) Enchufe el cable del adaptador en la toma de corriente del tensiómetro WatchBP Home A.
- 2) Inserte la clavija del adaptador en una caja de enchufe. Mientras esté conectado el adaptador de corriente, no se consume corriente de las pilas.

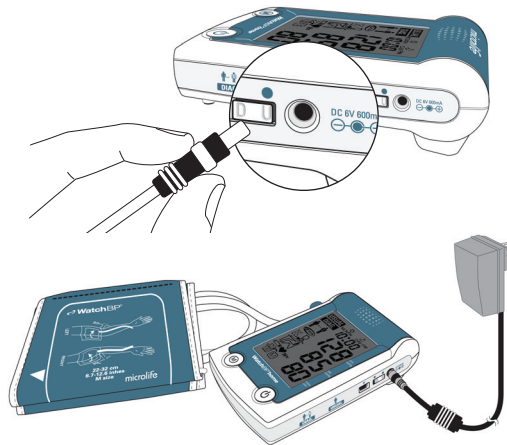

Seguridad, cuidado, prueba de precisión y eliminación

Seguridad y protección

Este dispositivo debe usar únicamente para el fin descrito en este manual. El dispositivo comprende componentes sensibles y se debe tratar con cuidado. No se puede responsabilizar al fabricante de daños causados por un uso incorrecto.



- Evite que el dispositivo sea usado por niños sin supervisión; algunas piezas son tan pequeñas que podrían ser tragadas.
- Accione la bomba sólo cuando esté colocado el brazalete.
- No use el dispositivo si cree que está dañado o si hay algo que le parezca inusual.
- Lea las instrucciones de seguridad adicionales en los apartados individuales de este manual de instrucciones.
- No conecte el dispositivo a un ordenador antes de que se lo pida el software del ordenador.

Tenga en cuenta las condiciones de conservación y de funcionamiento descritas en las “Especificaciones Técnicas” de este manual.



Proteja el dispositivo del agua y la humedad



Proteja el dispositivo de la luz solar directa



Proteja el dispositivo del calor y el frío extremos



Evite la proximidad a campos electromagnéticos, como los producidos por teléfonos móviles




No abra nunca el dispositivo



Proteja el dispositivo contra impactos y caídas

Cuidado del dispositivo

Limpie el dispositivo con un paño suave y seco.

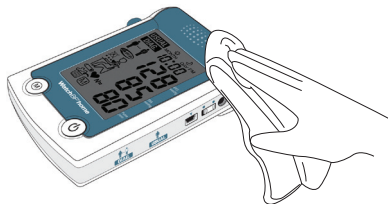

Prueba de precisión

Recomendamos someter el dispositivo WatchBP Home a una prueba de precisión cada 2 años o después de un impacto mecánico (p.ej., si se ha caído). Por favor, contacte con Microlife para concertar la prueba.

Cuidado del brazalete

NO lave el brazalete. NO planche la funda del brazalete.



¡No lave el brazalete!



¡No planche el brazalete!

Eliminación de residuos

Las pilas y los instrumentos electrónicos han de eliminarse de acuerdo con las reglamentaciones locales aplicables y no como basura doméstica.

Mensajes de error

Si se produce un error durante la medición, se interrumpe la medición y se visualiza un mensaje de error «Er».



- Por favor, consulte a su médico, si este o cualquier otro problema ocurre repetidamente.
- Si cree que los resultados son inusuales, por favor, lea detenidamente la información en este manual de instrucciones.



| Error | Descripción | Posible causa y remedio |
|--------|------------------------------|--|
| «Er 1» | Señal demasiado débil | Las señales del pulso en el brazalete son demasiado débiles. Vuelva a ajustar el brazalete y repita la medición. |
| «Er 2» | Señal de error | Durante la medición se han detectado señales de error por el brazalete, causadas, por ejemplo, por un movimiento o por la contracción de un músculo. Repita la medición manteniendo el brazo quieto. |

| | | |
|--------|---------------------------------------|---|
| «Er 3» | No hay presión en el brazalete | No se puede generar una presión adecuada en el brazalete. Se puede haber producido una fuga. Cambie la pila si fuese necesario. Repita la medición. |
| «Er 5» | Resultado anormal | Las señales de medición son imprecisas y, por ello, no se puede visualizar ningún resultado. Lea la lista de chequeo para realizar mediciones fiables y repita la medición. |

| | | |
|------|--|--|
| «HI» | Pulso o presión de brazalete demasiado alto | La presión en el brazalete es demasiado alta (superior a 300 mmHg) O BIEN el pulso es demasiado alto (más de 200 latidos por minuto). Relájese durante 5 minutos y repita la medición. |
| «LO» | Pulso demasiado bajo | El pulso es demasiado bajo (menos de 40 latidos por minuto). Repita la medición. |

Datos importantes acerca de la presión arterial y su medición en casa

Are home blood pressure measurements valuable?

Yes. The American Heart Association and European Society of Hypertension have demonstrated that home blood pressure measurements are important in determining accurate blood pressure.

- La presión arterial es la presión de la sangre que circula por las arterias, generada por el bombeo del corazón. Se miden siempre dos valores, el valor **sistólico** (superior) y el valor **diastólico** (inferior).
- La frecuencia del pulso es el número de latidos del corazón en un minuto.

- ¡Una presión permanentemente alta puede perjudicar su salud y debe ser tratada por su médico!
- Consulte siempre con su médico las lecturas de su presión arterial tomadas en casa y coménteles si ha notado algo inusual o si tiene alguna duda. **No confíe nunca en una sola lectura de presión arterial.**
- Existen muchas causas de una **presión arterial excesivamente alta**. Su médico se las explicará en detalle y, en caso de necesidad, le ofrecerá el tratamiento adecuado.
- La presión arterial está sujeta a amplias fluctuaciones durante el transcurso del día, pudiendo verse afectada por emociones, ejercicio físico y otros factores.

Evaluación de los datos de presión arterial

La tabla que figura a la derecha clasifica los datos de presión arterial para adultos conforme a las directrices de la Sociedad Europea de Hipertensión (SEH) de 2007. Datos en mmHg.

El valor más elevado es el que determina la evaluación. Ejemplo: Un valor de lectura entre **150/85** ó **120/98** mmHg indica «Hipertensión grado 1».

| Categoría | Sistólico | Diastólico |
|--------------------------------|-----------|------------|
| Óptima | < 120 | < 80 |
| Normal | 120 - 129 | 80 - 84 |
| Normal alta | 130 - 139 | 85 - 89 |
| Hipertensión grado 1 | 140 - 159 | 90 - 99 |
| Hipertensión grado 2 | 160 - 179 | 100 - 109 |
| Hipertensión grado 3 | ≥ 180 | ≥ 110 |
| Hipertensión sistólica aislada | ≥ 140 | < 90 |

Especificaciones técnicas

| | |
|--|--|
| Temp. de operación: | • 10 a 40 °C / 50 a 104 °F |
| Temp. de conservación | • -20 a 50 °C (-4 a 131 °F) |
| Peso: | • 15 - 90 % de humedad relativa máxima |
| Dimensiones: | • 385g (incluyendo las pilas) |
| Procedimiento de medición: | • 150 x 100 x 50 mm |
| Método: | • Oscilométrico, según Korotkoff |
| Rango de medición: | • Fase I sistólica, Fase V diastólica |
| Indicación de presión de brazalete: | • 30 - 280 mmHg – presión arterial |
| | • 40 - 200 latidos por minuto – pulso |
| | • Rango: 0 - 299 mmHg |
| | • Resolución: 1 mmHg |
| | • Precisión estática: presión dentro de ± 3 mmHg |
| | • Precisión estática: ± 5 % del valor medido |
| Fuente de corriente: | • 4 x pilas de 1.5 V; tamaño AA |
| | • Adaptador de corriente C.C. 6V, 600 mA (opcional) |

| | |
|---|---|
| Referencia a normas: | • Estándar del dispositivo: El dispositivo cumple con los requisitos del estándar para tensiómetros no invasivos. EN 1060-1 EN 1060-3 EN 1060-4 IEC 60601-1 IEC 60601-1-2 |
| Compatibilidad electromagnética: | • El dispositivo satisface las estipulaciones del estándar IEC 60601-1-2. Las estipulaciones de la Directiva UE 93/42/CEE para dispositivos médicos clase IIa se han cumplido. |

CE 0044



Parte aplicada tipo BF



Número de referencia



Número de serie



Fabricante

Microlife se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin notificación previa por escrito.

Tarjeta de garantía

Este dispositivo está cubierto por una garantía de cinco años a partir de la fecha de compra. Esta garantía sólo tiene validez si se presenta la tarjeta de garantía cumplimentada por el propietario confirmando la fecha de compra o el recibo de compra. Esta garantía no cubre las pilas, ni el brazalete ni las piezas de desgaste.

Nombre: _____

Dirección: _____

Fecha: _____


Teléfono: _____

Email: _____

Producto: WatchBP Home A

**Número
de producto:** BP 3MX1-3

Fecha:

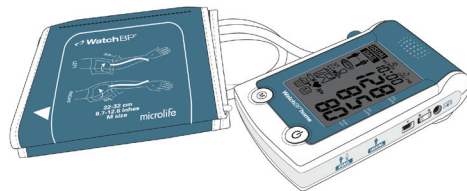

Europa/Oriente Medio/África

Microlife WatchBP AG
Esenstrasse 139
9443 Widnau, Switzerland
Tel. +41 71 727 7000
Fax +41 71 727 7011
Email: watchbp@microlife.ch
www.watchbp.com

Asia

Microlife Corporation
9F, 431, RuiGang Road, NeiHu
Taipei, 114, Taiwan, R.O.C.
Tel. +886 2 8797 1288
Fax.+886 2 8797 1283
Email: watchbp@microlife.com.tw
www.watchbp.com

Ámerica del Norte/Ámerica Central/Ámerica del Sur

Microlife Medical Home Solutions, Inc.
2801 Youngfield St., Suite 241
Golden, CO 80401, USA
Tel. +1 303 274 2277
Fax +1 303 274 2244
Email: watchbp@mimhs.com
www.watchbp.com

CE 0044



IM 04



Lea detenidamente las instrucciones antes de usar este dispositivo.

microlife

IB WatchBP Home A 3MX1-3 011009